


# BATTERIE LAPINS

## Description modèle standard pour lapins entre 3 et 5 kg

- Batterie de 3 cages, montée sur 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions du châssis : 799\*878\*1901mm
- Dimensions des cages :
  - Hauteur de cage : 50 cm
  - Surface au sol : 4400 cm<sup>2</sup>
- Type de sol : grillage plat Inox ou bac plastique perforé (ABS ou Noryl)
- Plateau de récupération des excréments en inox ou plastique (ABS ou Noryl)
- Toit des cages amovible en plastique (ABS ou Noryl)
- Fond de la batterie en inox avec perforations et renforts diagonaux
- Cloison entre les cages en PVC amovible : possibilité de communication entre les batteries
- Possibilité de raccordement entre les batteries
- Abreuvement : biberon en façade ou pipette automatique
- Nid perforé amovible disponible en option
- Nid externe pour portées réalisable sur mesure

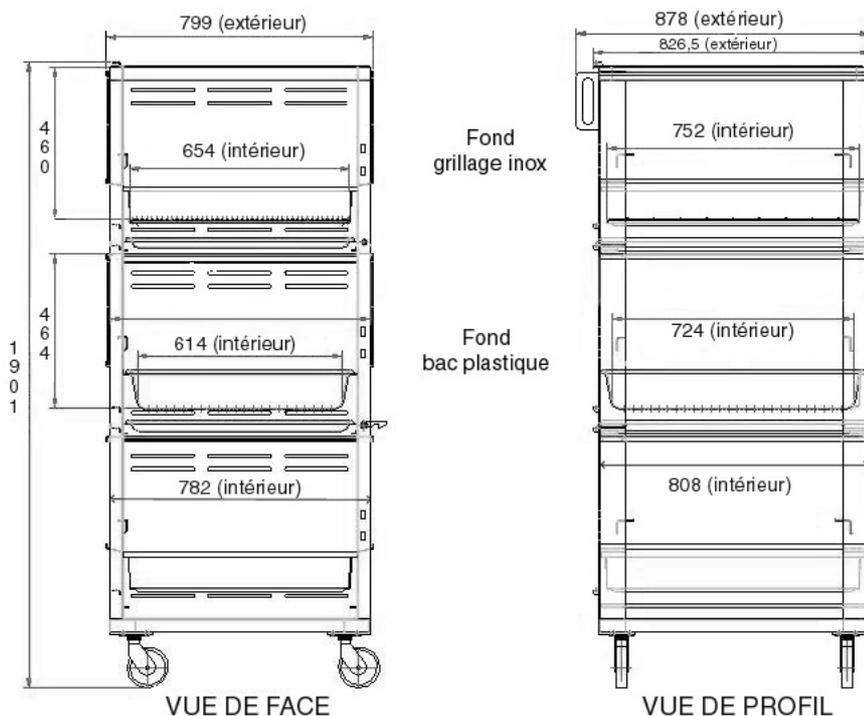

**Possibilité de réalisation à façon.**

**N'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d'informations !**

**Cage avec biberon ou  
abreuvement automatique  
et mangeoire amovible**



**Aération des cages  
par perforation de la paroi du fond**



**Défecteurs sur parois  
latérales et porte  
pour limiter les  
contaminations entre cages**



**Nid amovible**

