
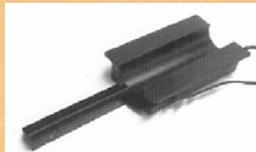


PLATEAUX CHAUFFANTS PETITS RONGEURS

Nouveau

MODULES CHAUFFANTS EN PVC ET ALU

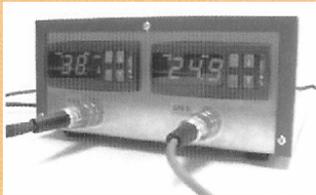

Boîtier électrique de réglage et/ou de contrôle de la température (de 20 à 42°C), pouvant alimenter ou contrôler 2 postes parmi :

- Plateau chauffant PVC recouvert d'aluminium pour une conduction optimale de la chaleur, existant en 2 modèles :
 - Plateau chauffant plat
 - Plateau chauffant circulaire pour 1 rat
- Extension caudale pour chauffer la queue des rats lors de prélèvements caudaux
- Bloc circulaire multi position pour maintenir la température de 4 souris simultanément
- Sonde rectale sur le boîtier électrique pour contrôler la température corporelle de l'animal

PLATEAU CHAUFFANT EN PLEXIGLASS AVEC CIRCULATION D'EAU CHAUDE

- Dimensions totales : 400 x 300 mm
- Surface chauffée : 306 x 186 mm
- Circulation interne par tubulures de \varnothing 6mm
- Espacement inter-tubulures : 6 mm
- Connexions pour arrivée et évacuation de l'eau
- Compatible avec la pompe TP500T/Pump pour une température comprise entre 30 et 42 °C

